

SINCE 1889



Yamato

马弗炉

Standard Muffle Furnace

**FO11C/211C/311C/
411C/511C/611C/
711C/811C**



YAMATO SCIENTIFIC

马弗炉

Muffle Furnace | 标准型

FO111C/211C/311C/411C/511C/611C/711C/811C

使用温度范围 100~1150℃

温度调节精度 ±2℃

内容积 1.5L 3.75L 7.5L 9L 11.3L 17.5L 23.6L 30L

8种内容积供选择，带程序运行功能。

- 可进行程序运行。
- 上下键操作设定更简易，搭载了操作性优良的控制
器，实现温度控制的高精度。
- 设定温度、时间、指示值都可进行数字表示。
- 采用数字设定与超温保护一体的控制器。发生异常
时可进行自诊断功能、过电流漏电保护开关等安全
控制。
- 温度传感器采用寿命长的 R 型热电偶。
- 配备了排气口。
- 还准备了排气装置、试料盒、氮气导入装置（付流
量计）、温度输出端子等选购功能



规格

型号	FO111C	FO211C	FO311C	FO411C	FO511C	FO611C	FO711C	FO811C		
性能	使用温度范围	100~1150℃								
	温度调节精度	±2℃ (at1150℃)								
	常温最高温度到达时间	约60分钟		约70分钟		约80分钟				
构成	外装	冷轧钢板，表面耐药品性涂装								
	炉体	陶瓷纤维								
	传感器	双支R热电偶								
	加热器	铁铬铝合金加热丝								
		1KW	1.5KW	2KW	2.2KW	2.5KW	3KW	3.5KW	4KW	
排气口	内径20mm，上部									
冷却风叶	轴流风扇									
控制器	温度控制方式	PID控制								
	温度设定/表示	数字设定/数字表示								
	超温保护	控制器一体型								
	超温保护设定方式	数字设定								
	运行功能	定值运行、程序运行（6种模式30段×1、15段×2种模式、10段×3种模式）								
	附加功能	偏差修正功能、停电补偿功能、锁键功能								
定时器	1分~99小时59分以及999小时50分数字设定、自动运行、快速自动停止									
安全装置	自诊断回路（温度传感异常、自动过升防止）、过升防止器、防止过电流的漏电保护开关、按键锁功能									
规格	内尺寸 (宽×深×高mm)	100×150×100	100×250×150	200×250×150	200×300×150	300×250×150	250×350×200	270×350×250	300×400×250	
	外形尺寸 (宽×深×高mm)	346×405×517	346×505×567	446×505×567	446×554×567	507×504×627	507×604×677	507×605×727	507×655×727	
	内容积	1.5L	3.75L	7.5L	9L	11.3L	17.5L	23.6L	30L	
	电源(50/60Hz) 额定电流	AC220V	AC220V	AC220V	AC220V	AC220V	AC220V	AC220V	AC220V	AC220V
		5A	7.5A	9.5A	10.5A	12A	15A	18A	20A	
重量	约24kg	约30kg	约37kg	约38kg	约44kg	约52kg	约58kg	约62kg		
付属品	排气口盖1个									
选购品	架台	ON30C			ON61C					
	其它	排气装置(AC220V)、试料盒、N ₂ 导入装置(付流量计)、记录仪、组合警示灯(待机/运行/故障)、外部通信功能(RS485)、温度输出端子(4~20mA)、外部警报输出端子、时间到达输出端子								

自动过升防止

过升防止器

自诊断功能

锁键功能

停电补偿功能

过电流漏电断路器


CE 认证



操作面板



温度上升特性曲线 (FO311C 型)

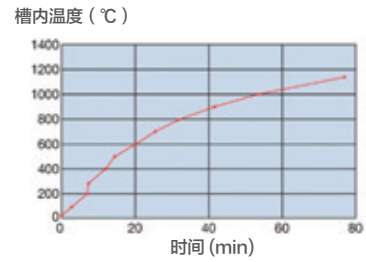

内槽



通过采用合理的断热构造，提高了断热特性，温度分布精度。

排气装置单元 (选购)



可以迅速排出由于槽内温度上升产生的气体等。
 管路：柔性管、铝制
 长1.5m
 直径50mm
 排气装置电源：
 单相 AC220V 0.15A

外部输出端子 (选购)






- 到时输出
在自动停止及程序结束时输出
- 测定温度传送输出
用于槽内温度的记录、监测。
温度输出：4~20mA

试料盘 (选购)



尺寸图 (mm)

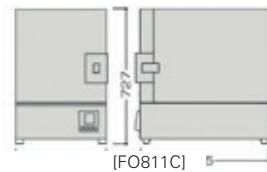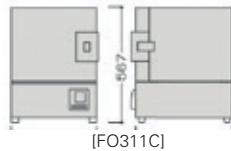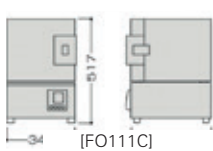

SINCE 1889



雅马拓科技贸易（上海）有限公司

上海市徐汇区桂箐路65号新研大厦1001、1002室

TEL: 021-6443-5319

FAX: 021-5452-0268

URL: <http://www.yamato-china.cn>

MAIL: info@yamato-shanghai.com



手机浏览网站



微信公众号

北京办事处 TEL: 010-6704-2097 FAX: 010-6704-2097

上海办事处 TEL: 021-6443-5319 FAX: 021-5452-0268

广州办事处 TEL: 020-6107-8986 FAX: 020-6107-8986

重庆办事处 TEL: 023-6746-5370 FAX: 023-6746-5300

西安办事处 TEL: 029-8542-7357 FAX: 029-8542-7357